



Behagelig passform
for et aktivt liv!



RELINTM II Soft &
RELINTM II Extra Soft
fra GC

Mykt silikonbasert
rebaseringsmateriale for
direkteteknikk

GC

Behagelig passform og funksjon som får

Dagens pasienter lever ikke bare et lengre liv enn det som var mulig; de lever også et aktivt liv. De vil kunne le uhindret, prate uten problemer og nyte god mat uansett alder til tross for at de har proteser. Proteser, irritasjoner, tannekstraksjoner og implantat fører uvilkårlig til endringer i tannsettets myke og harde vev.

Reline II Soft og Extra Soft fra GC skaper et mykt lag mellom protesen og mukosa, noe som fører til at protesen effektivt tilpasses de nye, lokale forholdene. Dette forenkler tilheling med beholdt komfort og funksjon i flere uker og opp til mange måneder.



Bildene gjengis med tillatelse av Dr. Garcia-Baeza, Spania.

Lettapplisert silikon-liner for direkteteknikk

Materialets **viskositet** gjør at det **flyter godt ut under trykk og formes perfekt** til alle anatomiske detaljer. Fordi materialet er **lett å trimme** blir den siste finishering av kantavslutningen enda enklere.



Bedre trimmingsegenskaper gjør finishering av kantavslutningene enklere

Langvarig komfort og lindring for dine pasienter

Med Reline II skjer det ingen varmeutvikling når materialet stivner, hvilket gir pasienten en behageligere opplevelse. Materialet beholder sine **myke og luktfrie egenskaper** og til og med sin **stabilitet og elastisitet** i flere uker eller opp til flere måneder. Resultatet? En holdbar og enkel løsning for protesepasienter.



Kantavslutningene beskyttes ytterligere med finisheringsmaterialet Reline II

Sterk binding men likevel enkelt å håndtere

Den videreutviklede sammensetningen av **GC RELINE II PRIMER FOR RESIN** gir sterk og holdbar binding til protesen. Den utmerkede bindingen gjør likevel ikke materialet mindre fleksibelt.

Du kan legge til rebaseringsmateriale og gjøre tilpasninger som følge av forandringer i slimhinne og benfeste opp til tre måneder etter den første appliseringen. Og med det nye **RELINE II REMOVER FOR RESIN** går det veldig raskt å fjerne rebaserings-skiktet og erstatte det med et nytt.



GC RELINE II
Primer
for resin




GC RELINE II
Remover
for resin

pasienten til å le hver dag

Holder seg mykt og elastisk: Velg det produkt som er best egnet for den kliniske situasjonen.

GC RELINE™ II Soft er et bestandig materiale med en materialhardhet på 32 (Shore A). Materialet er spesielt egnet for å **normalisere** irritert vev og **fremme vevstilheling** etter ekstraksjon eller implantatkirurgi. Materialet kan forbli der i **dager eller uker**.

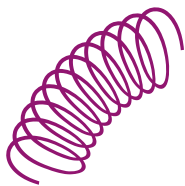

Takket være en Shore A-hardhet på 48 beholder **GC RELINE™ II Soft** sin elastisitet og fordeler **belastningstrykket over tid på samme måte som en støtdemper** dersom det oppstår en anatomisk utfordring. Materialet er til og med perfekt for rebasering av **implantatstøttede proteser** etter avsluttet tilhelingsfase. Materialet kan forbli der i **uker eller måneder**.



Enkel applisering og håndtering under hele prosedyren



Protese for rebasering etter plassering av fire implantater.



Ru opp overflaten i området som skal rebaseres.



Appliser RELINE II PRIMER på området som skal rebaseres. Blås forsiktig med luft.



Enkel applisering med direkteteknikk.



Appliser GC RELINE II (Extra) Soft. Arbeidstiden er 2 min.



Plassér protesen i pasientens munn og trim musklene. La sitte på plass i 5 min.



Fjern overskuddsmateriale med skalpell eller saks. Trim med RELINE II TRIMMESPISS.



Finishér med RELINE II FINISHERINGSJUL.



Protesen er rebasert.

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Behagelig passform for et aktivt liv!

Gjør deg kjent med Reline-familien fra GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Materiale	Akrylat	A-silikon	A-silikon	Akrylat uten metylmetakrylat
Indikasjoner	<ul style="list-style-type: none"> • Trykkpunkter • Under implantatprosedyrer • Myk-rebasering • Vevstilheling etter trauma/kirurgi • Funksjonsavtrykk 	<ul style="list-style-type: none"> • For vevsforberedende behandling • Sensibel slimhinne • Trykkpunkter • Normalisering av irritert vev 	<ul style="list-style-type: none"> • Implantat • Trykkpunkter • Ved undersnitt • Smertelindring og økt pasientkomfort • Rebasering med lang holdbarhet i kasus med fravær av støttevev 	<ul style="list-style-type: none"> • Rebasering som holder over tid • Protoser med dårlig passform uten vevsskade • Siste steg etter forbehandling med mykt rebaseringsmateriale og/eller vevsforberedende behandling
Tid i munnen	Dager/uker/måneder	Dager/uker	Uker/måneder	Måneder/år

RELINE II SOFT & EXTRA SOFT finnes i følgende pakninger

Intro Kit

010259 **GC RELINE II Soft Intro Kit:**
 1 Reline II, patron (Soft eller Extra Soft)
 1 Primer for akrylat
 1 Trimningsspiss
 1 Finisheringshjul
 1 Fjerningsmiddel

010262 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:**
 1 Reline II, patron (Soft eller Extra Soft)
 1 Primer for akrylat
 1 Trimningsspiss
 1 Finisheringshjul
 1 Fjerningsmiddel

Refills

010265 GC RELINE II Soft, patron, 48 ml
 010268 GC RELINE II Extra Soft, patron, 48 ml
 010273 GC RELINE II Primer for akrylat, 10 ml
 010271 GC RELINE II Finisheringsmateriale (Modifier),
 1-1 Pack, 2 fp à 9 ml
 010275 GC RELINE II Fjerningsmiddel, 5,5 ml
 010277 GC RELINE II Trimningsspiss 3 st.,
 010280 GC RELINE II Finisheringshjul 12 st,
 010283 GC RELINE II Engangspensler 6 st

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Box 70396
 SE-107 24 Stockholm
 Sverige
 Tel: +46 8 506 361 85
 info@nordic.gceurope.com
 http://www.gceurope.com/local/nordic

