



Sterk som fjellet

G-ænial®
Universal
Injectable
fra GC

Ekstra sterk
restorativ kompositt

GC

Sterk som fjellet

For alle kavitetsklasser, Dekkende lag trengs ikke

Dr Anthony Mak, Australia



252% Al røntgenkontrast
for sikker oppfølging



Perfekt design:
Kontroll over materialflyten
og lett å fjerne materialrester




Bøybare spisser
letter tilgang til
alle kaviteter



Intet kvalitetsproblem:
Materialet sitter
der du har applisert det



Enkel applisering
gir maksimal
komfort

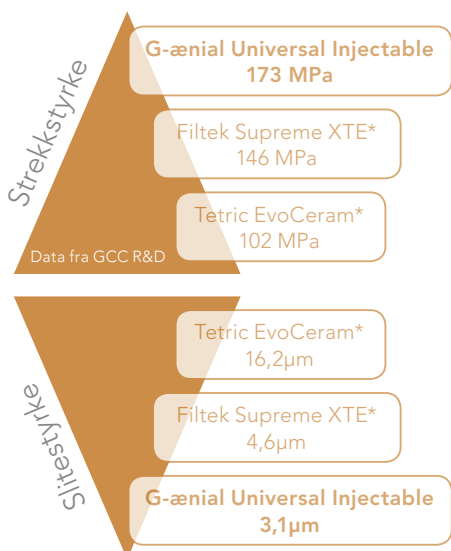

Ultra-fine **Barium
fillerpartikler** (150 nm)
& **høy filler-grad**

FSC-teknologi
(**Full-coverage
Silane Coating**)
forbedrer **fordeling**
og **adhesjon** av
fillermaterial
I matrix.

**Eksepsjonelle
egenskaper**
**Kleber ikke
til instrumentene**
Enkel å applisere
Høy røntgenkontrast

* Not trademarks of GC

Start applisering nå!



Klasse II-restaureringer



Opprinnelig situasjon med
aproximalkaries



Fjerning av gammel fylling og
ekskavering av karies



Undersnitt kan enkelt nåes med
de bøyelige spissene



Den aproximale veggen bygges
opp med emaljefarge JE



Fjerning av seksjonsmatrise
etter at den aproximale veggen
er bygget opp



En klasse I-prosedyre kan nå
begynnes; dentinskiktet lages
med A4-farge



Det endelige emaljelaget settes
med JE-fargen




Sluttresultatet etter finishing
og polering av
kanttilslutningene

Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Klasse III-restaureringer



Opprinnelige
Klasse III-kaviteter

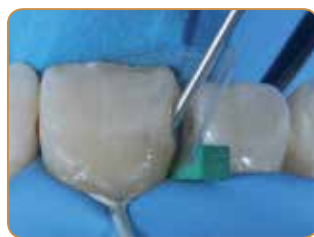

Applisering av G-ænial
Universal Injectable (A2)



Resultatet direkte etter
behandlingen



Perfekt integrering
ved recall-besøk

Dr Ahmed Al-Jaff, Iraq

G-ænial® Universal Injectable fra GC

Overlegen estetikk med holdbar glans!



Dr. Floriann Klumpp, Germany



Dr. Ali Salehi, France

	Standardfarger											Dentinfarger			Emaljefarger	
	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
Sprøyte 1 mL (1,7g)	901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486



901503 - Appliseringsspiss
Lang appliseringsnål (30 stk.)



Oppdag også GC's universalbonding G-Premio BOND:

- 009030 – G-Premio BOND Kit 5mL
- 009036 – G-Premio BOND Flaske, Refill 5mL
- 009032 – G-Premio BOND 3-Flaske, Refill, 3x5mL
- 009034 – G-Premio BOND Unit Dose, 50 pieces

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Nordic AB
Strandvägen 54
S-193 30 Sigtuna
Sweden
Tel:+46 768 544 350
info.nordic@gc.dental
http://nordic.gceurope.com

